

**ActivNeck™** ist angenehm zu tragen. Es enthält eine steife Einlage zur wirksamen Unterstützung des Nackens. Das atmungsaktive Baumwollmaterial zur Hautseite absorbiert Feuchtigkeit und die weiche Polsterung sorgt für hohen Tragekomfort.



**ActivNeck™** ist geeignet zur Stabilisierung der Halswirbelsäule und des Nackens, bei leichten Verstauchungen der Halswirbel, Schleudertrauma, Läsion der Halswirbel, Heilung nach Operationen und bei Verletzungen der zervikalen Bandscheiben.


## Anlegen und Tragen:

### 1 Verschlüsse öffnen



Etwaige Baumwollfasern und -hülsen, die sich auf dem Produkt befinden, stellen kein Gesundheitsrisiko dar.

### 2 Die Krause um den Hals legen

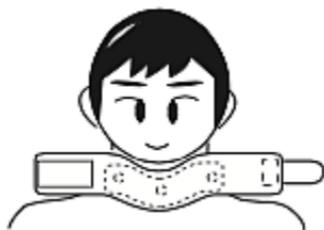

Legen Sie das Produkt um den Hals und stellen Sie sicher, dass die Plastikeinlage in der Mitte nach vorne weist.

### 3 Den Klettverschluss schließen



Passen Sie den Klettverschluss an und schließen Sie ihn.

### 4 Überprüfen



Überprüfen Sie, dass das Produkt nicht zu fest oder zu locker sitzt.

## **Achtung**

- Bei der ersten Verwendung empfiehlt es sich, das Produkt nicht länger als 2 Stunden zu tragen
- Nicht während des Schlafens tragen
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich entsprechend dieser Benutzeranleitung, da es sonst zur Beschädigung des Produkts oder zu Verletzungen kommen kann
- Stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss nicht an Kleidungsstücken anhaftet, da dies zur Beschädigung der Kleidung führen kann
- Dieses Produkt enthält Chemiefasern. Falls das Produkt Hautreizungen verursacht, stellen Sie seine Verwendung unverzüglich ein und suchen Sie Ihren Arzt auf

### **Waschanleitung:**

- Handwäsche mit kaltem Wasser
- Keine Aufhellungs- oder Bleichmittel verwenden
- Das Produkt bei guter Belüftung lufttrocknen, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Dieses Produkt kann durch Wasser-, Schweiß- oder Reibungseinwirkung Farbe verlieren
- Nicht im Trockner trocknen

### **Lagerung:**

- An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren
- Keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen

### **Entsorgung:**

- Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Textilien

**ActivNeck™** verfügt über eine steife Einlage und eine weiche, atmungsaktive Polsterung. Die Außenschicht besteht aus feuchtigkeitsabsorbierender Baumwolle. Dank des Klettverschlusses ist die Halskrause einfach anzulegen und abzunehmen.



Farbe: Cremefarben  
Einheitsgröße  
Unisex

Handgefertigt in Japan von:



Daiya Industry Company, Ltd.

 1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 Japan

Vertrieb im Vereinigten Königreich, der EU und Australien durch:

 **Gower**  
**Health & Fitness**  
**Solutions**

271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA

Vereinigtes Königreich

[info@activsupports.com](mailto:info@activsupports.com)